


## KUULOKOJE EI TOIMI:

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuulokoje on mykkä	Kuulokoje ei ole päällä	Varmista, että paristokotelo on kiinni
	Paristo on tyhjä	Vaihda paristo
	Kuulokoje on väärällä ohjelmalla	Avaa ja sulje paristokotelo / vaihda kuunteluohjelma (M-asento)
	Kuulokojeen äänenvoimakkuus on liian pienellä	Nosta kojeen äänenvoimakkuutta
	Korvakappaleessa on vettä	Irrota korvakappale kojeesta. Ravistele tai puhalla esim. pumpulla vesi korvakappaleesta
	Korvakappale on tukkeutunut vahasta	Puhdista korvakappale
	Kuulokoje on rikki	Toimita kuulokoje huoltoon
Kuulokoje vinkuu	Korvakäytävässä on vahatulppa	Tutkituta korvakäytävä esim. terveyskeskuksessa
	Korvakappale on huonosti korvassa	Varmista, että korvakappale on tiiviisti ja oikein korvassa
	Kojeen väliletku on kova ja vaihtamatta tai se on liian lyhyt	Vaihda uusi väliletku, varmista letkun oikea pituus
	Korvakappale on löysä	Ota yhteys kuuloasemalle
	Korvakappale on rikki	Ota yhteys kuuloasemalle
	Kuulokoje on rikki	Toimita kuulokoje huoltoon
Kuulokoje katkoo tai ääni säröytyy	Heikko paristoteho	Vaihda paristo
	Kuulokoje on rikki	Toimita kuulokoje huoltoon
Kuulokoje ei ole tarpeeksi voimakas	Korvakäytävässä on vahatulppa	Tutkituta korvakäytävä esim. terveyskeskuksessa
	Heikko paristoteho	Vaihda kuulokojeeseen uusi paristo
	Kuulokoje on rikki / tukossa	Toimita kuulokoje huoltoon
	Kuulosi on saattanut heikentyä	Ota yhteys kuuloasemalle, muista huollattaa koje ensin

## KORVANTAUSKOJEEN HUOLTO

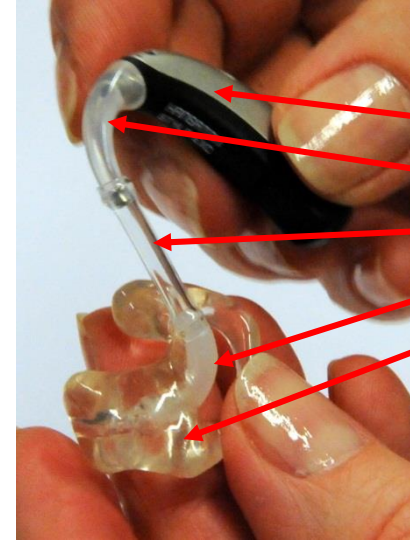

### KORVANTAUSKOJEEN OSAT:

- Kuulokoje**
- Kuulokojeen koukku**
- Väliletku (vaihdeettava)**
- Korvakappaleen koukku**
- Korvakappale**



- Kuulokojetta ei saa kastella
- Puhdistus vain pyyhkimällä, esim. nihkeällä liinalla
- Kuulokojeen paristokotelo kannattaa avata kokonaan yöksi
- Paristo on hyvä poistaa kojeesta kokonaan silloin, kun koje on pidempään käyttämättä
- Säilytä kuulokojetta säilytyskotelossaan

Tarvittaessa yhteydenotto: Satasairaala / Kuuloasema B2, soittoaika ma ja ke-pe klo 8-10, sekä ti klo 12-13, p. 02-627 7259 /sihteri

Kojekorjausajat: ma ja ke klo 12-14, ti klo 8:30-10

# KORVANTAUSKOJEEN HUOLTO


## KORVAKAPPALEEN PESU

- Korvakappaleen puhtaus tarkistetaan päivittäin.
- Korvakäytävään kertynyt vaha voi tukkia korvakappaleen, jolloin kuulokojeella ei kuule tai koje voi vinkua.



Korvakappale on kiinnitetty kuulokojeen koukkuun väliletkulla. Pesua varten korvakappale irrotetaan kuulokojeen väliletkusta.

Korvakappale pestään haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella noin kerran viikossa. Tarvittaessa liotetaan hetki.

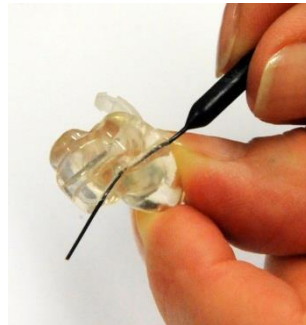

Korvakappaleen kuivaus on tärkeää. Kuulokojeella ei kuule, jos äänikanavaan jää vettä. Äänikanavasta puhalletaan vesipisarot pois tai korvakappale ravistellaan ja tarvittaessa jätetään yöksi kuivumaan.

Korvakappaleen ilmastointikanavan eli ventin avaus siimalla tai vastavalla. Työnnä siimalanka korvakappaleen ventin läpi. Tarvittaessa myös äänikanavan voi puhdistaa näin.

## KUULOKOJEEN VÄLILETKUN VAIHTO




- Kuulokojeen väliletku tulee vaihtaa **1-2 kuukauden välein**.
- Vanha väliletku kovettuu, kellastuu, sitä on vaikeampi irrottaa ja kuulokojeen koukku voi rikkoutua.
- Vanha väliletku myös löystyy päistään, osat irtoilevat toisistaan ja kuulokoje voi pudota korvasta (kadotessa korvausvelvollisuus).
- Kojee vinkuu herkemmin ja sillä kuulee huonommin, ellei väliletkua vaihdeta.



Irrota väliletku korvakappaleesta ja kuulokojeen koukusta.

Mittaa uuden väliletkun pituus vanhan väliletkun mukaan.

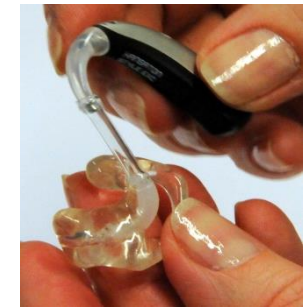

Liitä uusi letku hyvin korvakappaleeseen ja kojeeseen.

Väliletku on työnnettävä kojeen koukun päälle noin 2-3 mm matkalta