


COVID-19 näytteenotto nenänielusta

Tämä ohje koskee vain VSSHP:n näytteenottoa

CV19NhO (6466)

1. Näyte otetaan yhdellä taipuisavartisella Copan- tai Bioer nukkatikulla (Abakus -tilausnumero 958913 tai 958918) (tai vastaavalla laboratorion sen hetkisen ohjeistuksen mukaan) **sieraimen kautta takanielusta** pyöräyttämällä tikkua limakalvoa vasten, jotta saaliiksi saadaan takanielusta mahdollisimman paljon virusta.
2. Tikku katkaistaan **Copan UTM-**, Bioer-**putkeen tai** muuhun vastaavaan nestettä sisältävään virusnäytekuljetusputkeen (tai tehdaspuhtaaseen tyhjiin putkeen, esim. likvorputkeen). **Sulje putki huolellisesti.**
3. Näyteputket pyyhitään ulkopuolelta alkoholilla.
4. **Putkeen liimataan** potilaan nimitarra sekä tutkimuspyyntötarra ja laitetaan salpapussiin.
5. Salpapussi pakataan särkymättömään kannelliseen tartunnanvaarallisten näytteiden kuljetukseen tarkoitettuun astiaan tai muuhun näytelähetykseen tarkoitettuun astiaan tai pahvikoteloon, johon laitetaan selkeästi merkintä **"INFEKTIOHÄLYTYS" sekä näytteenottoindikaatio** (POT tai TYÖ (kts. [Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHP:ssa](#))). **Samaan kiireellisyyssluokkaan** (POT, TYÖ, ei merkintää) kuuluvat näytteet laitetaan **samaan kuljetusastiaan**. Tarvittaessa voit laittaa pehmustetta kuljetusastiaan.
6. Näytettä ei saa lähettää putkipostissa. Toimitus: Tyks klininen mikrobiologia, MD 8. krs.

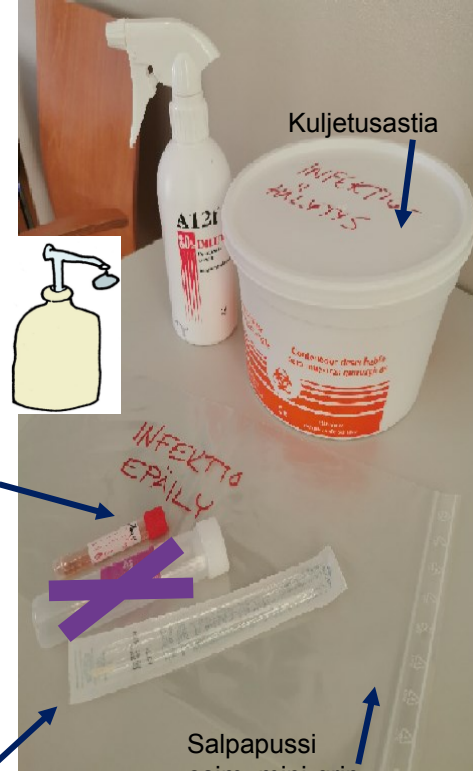

Nukkatikku esim.
Copan

Salpapussi
esim. mini-grip.

Huom!. Np-PikCV19 (14378), "pika-COVID-PCR" tehdään TyksLabin päivystyslaboratoriossa. Näytteet tutkimukseen toimitetaan päivystyslaboratorioon.

★ N Engl J Med 2020; 382:e76
DOI: 10.1056/NEJMvcm2010260



SHYG 7.9.2020