

Itse otettava klamydia- ja tippurinäyte emättimestä (vagina) (CtGcNhO, 1738)

Tutkimus on tarkoitettu klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen emätinnäytteestä.

Tarvittavat välineet

1. Näytteenottopakkaus (Kuva 1), joka sisältää nestettä sisältävän näyteputken, näytteenottotikun sekä kertakäyttöpipetin.
2. Muovipussi ja nimitarra.



Kuva 1

Valmistelu


1. Pese kädet kunnolla vedellä ja saippualla.
2. Riisu itsesi vyötäröstä alaspäin.
3. Avaa näytteenottopakkaus. Näytteenottoon tarvittavat paketissa olevat näyteputken ja näytteenottotikun. Pakkauksessa olevaa kertakäyttöpipettiä ei tarvita, sen voi hävittää (ks. kuva 2-1).
4. Älä avaa näyteputkea, mutta aseta se lähellä olevalle puhtaalle ja tasaiselle alustalle ennen näytteenottoa.

Huom! Älä koske näytteenottotikun valkoiseen päähän tai laske tikkua mihinkään. Älä kasta tikkua kuljetusputken nesteeseen ennen näytteen ottoa.

Näytteenotto

1. Ota näytteenottotikku suojakääreestä varovasti, välttämällä koskettamasta sen kärkeä. Pidä tikkua valkoinen pää ylöspäin, kuten kuvassa 2-2.
2. Pidä näytetikku toisessa kädessä ja levitä toisella kädellä häpyhuulia. Aseta näytetikun valkoinen pää n. 5 sentin matkalta emättimeen (ks. kuva 2-3) ja pyörittele tikkua emättimen seinämiä vasten 15-30 sekunnin ajan riittävän näytemäärän varmistamiseksi.
3. Poista näytetikku varoen koskemasta ihoa emättimen ulkopuolella. Älä laske tikkua mihinkään.

4. Avaa näyteputken korkki. Laita näytetikku näyteputkeen (valkoinen, pehmeä kärki putken alaosaan kohti, ks. kuvat 2-4 ja 2-5). ÄLÄ kaada nestettä pois putkesta!
5. Katkaise näytetikku varovasti tikkuun merkitystä katkaisukohdasta, varoen roiskuttamasta putken sisältöä. Jos putki kaatuu tai neste valuu putkesta pois, on pyydettävä uusi näytteenottoasetti.
6. Sulje näyteputken korkki tiiviisti (ks. kuva 2-6) ja pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.

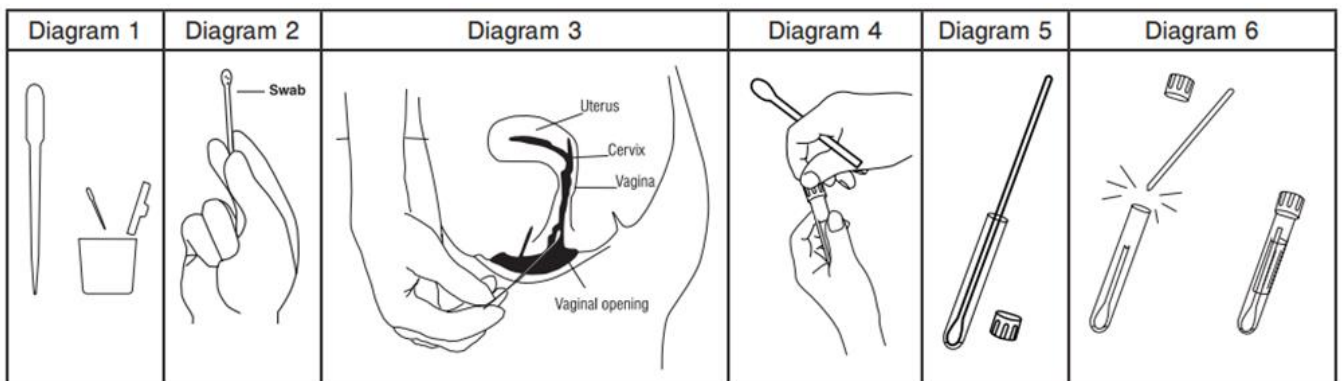

Kuva 2.

7. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeeseen nimitarraan.
8. Kiinnitä nimitarra näyteputkeen.
9. Laita näyteputki muovipussiin.
10. Säilytä näyteputki huoneenlämmössä.
11. Tuo näyteputki laboratorioon viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta. Näytteen voi myös palauttaa näyteautomaattiin, mikäli alueella sellainen on.

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan. Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Laadittu 15.5.2025 MG.