

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande

Egentliga Finlands Vårdförhållande

Åbo Universitets-centralsjukhus

Instruktion för Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea (CtGcNhO, 1738) självprovtagning av vaginalprov

Provtagningsmaterial:

1. Provtagningspaket Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit® (bild 1) som innehåller ett provrör med vätska, en provtagningsspinne och en engångspipett.
2. Plastpåse och namnetikett.



Bild 1.

Förberedelse:

1. Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål.
2. Öppna provtagningspaketet. Du behöver provröret och provpinnen. Engångspipetten behövs inte, den kan kastas (se bild 2-1).
3. Öppna inte provröret ännu, men placera det på en ren och plan yta.

Obs! Rör inte den vita mjuka delen av provpinnen och lägg inte pinnen på någon yta. Doppa inte pinnen i vätskan i provröret före provtagningen.

Provtagning:

1. Ta ut provpinnen ur skyddsförpackningen. Håll pinnen med den vita mjuka delen uppåt (bild 2-2).
2. Håll pinnen i ena handen och använd andra handen för att hålla isär blygdläpparna. För in pinnens mjuka del cirka 5 cm in i slidan (bild 2-3). Snurra pinnen mot slidväggen i 15–30 sekunder.
3. Ta ut pinnen och håll pinnen så att den mjuka delen inte rör något.

4. Skruva av korken på provröret. För ner pinnen i röret (bild 2-4 och 2-5). Håll INTE ut vätskan!
5. Bryt av pinnen vid markeringen, mot rörets kant (bild 2-6). Den mjuka delen ska vara kvar i röret.
6. Vätskan som är i röret skall vara kvar.

Observera! Vätskan i provröret är starkt irriterande för ögonen. Om vätska stänker i ögonen, skölj noggrant med vatten i flera minuter. Kontaktlinser ska tas ut om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja ögonen. Kontakta läkare om ögonirritationen kvarstår. Om röret välter eller vätskan rinner ut ur röret, måste ett nytt provtagningsset användas.

7. Skruva på korken ordentligt (bild 2-6) och tvätta händerna noggrant med vatten och tvål.

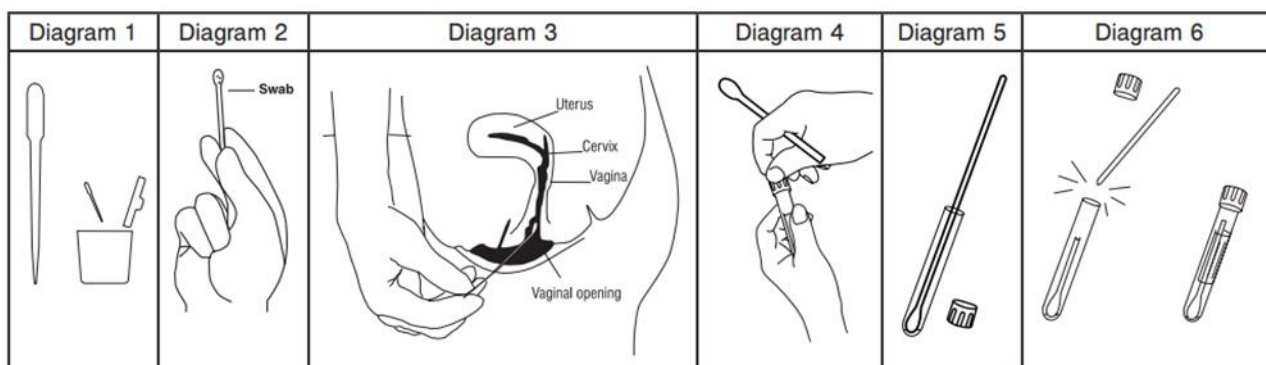


Bild 2.

8. Skriv namn, personnummer, provtagningsdatum och tid på namnetiketten.
9. Fäst etiketten på provröret.
10. Lägg provröret i den förslutningsbara påsen.
11. Förvara provröret i rumstemperatur.
12. Lämna in provet till laboratoriet senast dagen efter provtagningen. Provet kan också lämnas i en provautomat om en sådan finns i området.

Vid problem med provtagningen, kontakta den avdelning eller mottagning som begärt undersökningen. Svaret kan fås från den behandlande enheten.