

NÄYTTEEN OTTAMINEN LIMAKALVOLTA CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE NHO, CtGcNHO (1738) -TUTKIMUSTA VARTEN

Näytteenottovälineet

Abbott M multi-Collect Specimen Collection Kit -näytteenottopakkaus käy naisille ja miehille. Pakkauksessa on näytteenkuljetusputki (oranssi korkki), näytteenottotikku (oranssi varsi) ja kertakäyttöpipetti, jota ei tarvita otettaessa näytettä limakalvoilta.

Näytteenottopakkauksia tilataan logistiikasta yksi 50 kpl:een myyntierä kerrallaan (Nimike: ALINITY M MULTI-COLLECT SPECIMEN COLLECTION KIT, nimiketunnus 957094). Säilytys huoneenlämmössä. Mikäli tarve on pieni, voi näytteenottovälineet noutaa laboratorion.

Cervix-näytteet



1. Poista ylimääräinen lima kohdunkaulan suulta ja ympäröivältä limakalvolta puhtaalla liinalla. Heitä liina jätteisiin.
2. Aseta näytteenottotikku kohdunkaulakanavaan (oranssivartinen, paperipakkauksessa).
3. Pyöritä tikkua varovasti 10-30 sekuntia kohdunkaulakanavassa riittävän näytemäärän saamiseksi.
4. Vedä tikku varovasti pois, vältä koskettamasta vaginan limakalvoa.
5. Poista korkki näytteenkuljetusputkesta, vältä koskemasta siniseen läpipaino-osaan ja laita näytetikku putkeen.
6. Katkaise näytetikun varsi katkaisukohdasta varovasti niin, että sisältö ei roisku.
7. Sulje korkki tiiviisti. Liimaa pyyntötarra pystyyn. Älä ravista putkea. Säilytä ja kuljeta pystyasennossa.



Näytteenottotikku putkeen

Miesten virtsaputkinäytteet

1. Ennen näytteenottoa potilaan pitää olla virtsaamatta ainakin 1 tunti.
2. Laita näytteenottotikku 2-4 cm virtsaputkeen (oranssivartinen, paperipakkauksessa).
3. Pyöritä tikkua varovasti 2-3 sekuntia riittävän näytemäärän varmistamiseksi.
4. Vedä tikku varovasti pois.
5. Poista korkki näytteenkuljetusputkesta, vältä koskemasta siniseen läpipaino-osaan ja laita näytetikku putkeen.
6. Katkaise näytetikun varsi katkaisukohdasta varovasti niin, että sisältö ei roisku.
7. Sulje korkki tiiviisti. Liimaa pyyntötarra pystyyn. Älä ravista putkea. Säilytä ja kuljeta pystyasennossa.

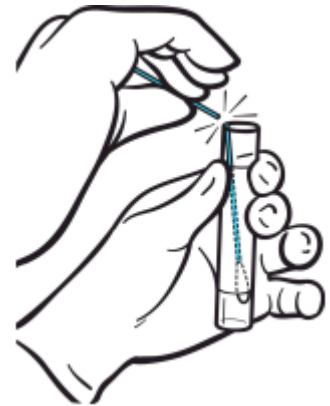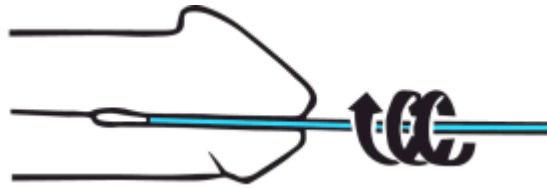

Säilytys ja kuljetus

Kuljetusputkeen siirretty näyte säilyy huoneenlämmössä tai jääkaapissa 14 vrk. Näyte toimitetaan Satasairaalan kl. mikrobiologian laboratorioon.