

## Nielunäytteenotto

---

### Tämä ohje koskee seuraavia tutkimuksia:

3635 Ps-StrAAg

2703 Ps-StrVi

4290 Ps-BaktVi

### Valmistautuminen näytteenottoon

Potilaan tulisi välttää syömistä, juomista, kurkkutablettien imeskelyä ja desinfioiden suuvesien käyttöä 1–2 tuntia ennen näytteenottoa. Myös veden juontia tulee välttää, sillä se voi vähentää bakteerien määrää nielussa ja heikentää tuloksen luotettavuutta.

### Näyteastia

Kuljetushyytelöputki viljelytutkimuksiin (Ps-StrVi, Ps-BaktVi) ja tekokuitu- (esim. rayon) tai nukkatikku antigeenitutkimuksiin.


### Näytteen laatu

Nieluerite

### Näytteenotto-ohje

Potilaan suuhun on katsottava riittävässä valossa ja painettava kieli alas niin, että näkyvyys nieluun on hyvä. Pumpulitikulla painellaan ja hierotaan melko voimakkaasti painaen nielurisojen pintaa ja kuoppia ja lisäksi nielun takaseinämää, samoin kuin märkäisiä alueita ja tulehtuneen näköisiä kohtia. Kitapurjeeseen, kieleen, hampaisiin tai posken limakalvoon ei pidä koskettaa, koska niissä on runsaasti normaaliflooraa, mikä haittaa viljelyn tulkintaa.

Viljelytutkimusten tikku laitetaan kuljetushyytelöputkeen ja toimitetaan mikrobiologian laboratorioon. Antigeenitutkimus tehdään heti laboratoriossa.

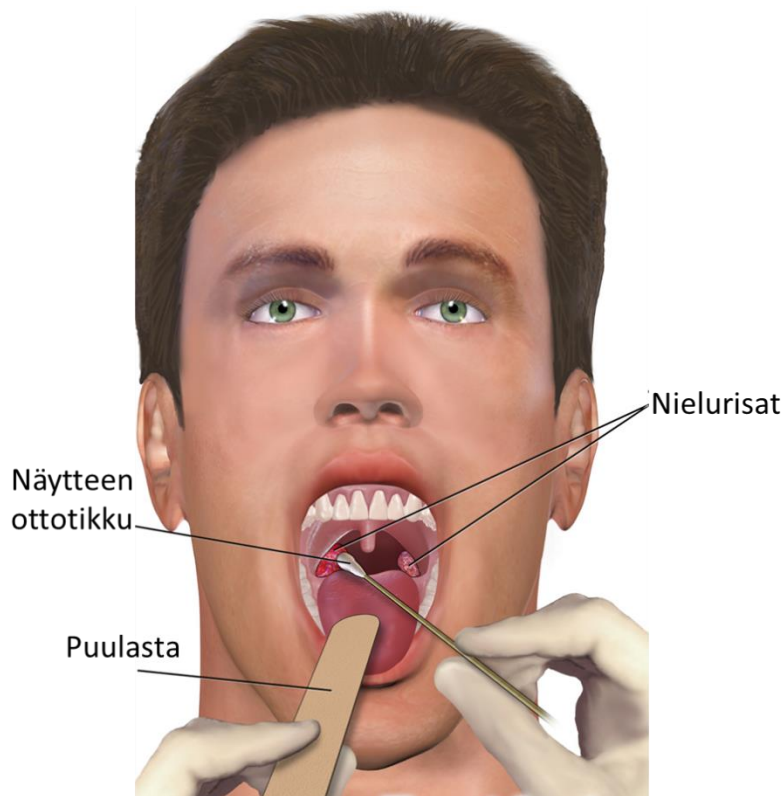

### **Näytteen säilytys**

Kuljetushyytelöputki voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos se toimitetaan saman päivän aikana mikrobiologian laboratorioon. Yön yli säilytys jääkaapissa. Antigeenitutkimuksen tikku säilyy muoviputkeen suljettuna tarvittaessa 72 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaapissa.

### **Yhteystiedot**

Laboratorio

Palvelunumero 044 707 9761

Arkisin kello 7.00 – 14.00

<https://www.sata.fi>