

Virtsanäytteen anto-ohje (U-BaktVi 1155, U-Solut 1940, U-KemSeul 1881)

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettävän lomakkeen.

Näytteeksi soveltuu parhaiten aamun ensimmäinen virtsa tai sitä seuraava vähintään neljä tuntia rakossa ollut virtsa.

Tarvittavat välineet

1. Kannellinen virtsanäytepurkki (tilavuus 120 millilitraa, kuva 1), jonka saat laboratoriosta.
2. Yksi tai useampi alipaineistettu näyteputki (kuva1).
3. Muovipussi ja nimitarrat

Naisten pesu- ja virtsaamisohje

1. Pese kädet.
2. Avaa näytepurkin kansi ja laske se pöydälle sisäpuoli ylöspäin.
3. Älä koske purkin tai sen kannen sisäpintaan.
4. Levitä häpyhuulet ja pese ulkosynnyttimet käsisuihkulla.
5. Kuivaa WC-paperilla kevyesti edestä taaksepäin suuntautuvalla vedolla.
6. Laske virtsaa aluksi WC-pyttyyn.
7. Kerää noin 2/3 purkillista keskeyttämättä virtsaamista.
 - loppuvirtsan saat laskea WC-pyttyyn

Miesten pesu- ja virtsaamisohjeet


1. Pese kädet.
2. Avaa näytepurkin kansi ja laske se pöydälle sisäpuoli ylöspäin.
3. Älä koske purkin tai sen kannen sisäpintaan.
4. Vedä esinahka taakse ja puhdista virtsaputken suu käsisuihkulla tai 3-4 kertaa puhtaalla veteen kostutetulla WC-paperilla. Ota puhdas paperi joka kerta.
5. Laske virtsaa aluksi WC-pyttyyn.
6. Kerää noin 2/3 purkillista keskeyttämättä virtsaamista.
 - loppuvirtsan saat laskea WC-pyttyyn

Virtsanäytteen siirto näytepurkista putkiin

Älä avaa putkien tulppia!

1. Kun olet virtsannut purkkiin, sulje purkin kansi tiukasti ja poista kannen tarra. Älä hävitä tarraa.
2. Aseta näytepurkki pöydälle.
3. Siirrä virtsanäyte välittömästi näyteputkiin seuraavalla tavalla:
 - Paina jokainen näyteputki tulppa edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen.

- Odota rauhallisesti niin kauan, kunnes virtsan tulo putkeen loppuu (kuva 2).
 - Laita lopuksi kannen suojatarra takaisin purkin kanteen täyttöaukon päälle.
 - Käännä putkia rauhallisesti ylösalaisin 8-10 kertaa, jotta putkessa oleva säilöntäaine sekoittuu virtsanäytteeseen. **Älä ravista putkia** (kuva 3).
4. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleisiin tarroihin.** Kiinnitä tarrat jokaiseen putkeen.
 5. Laita putket muovipussiin.
 6. Anna putket hoitajalle, kun tuot ne tutkittaviksi.
 7. **Täytä lisäksi esitietolomake, jos palautat näytteet näyteastioiden nouto- ja palautusautomaattiin.**
 8. **Laboratorio ei tutki nimettömiä näytteitä.**

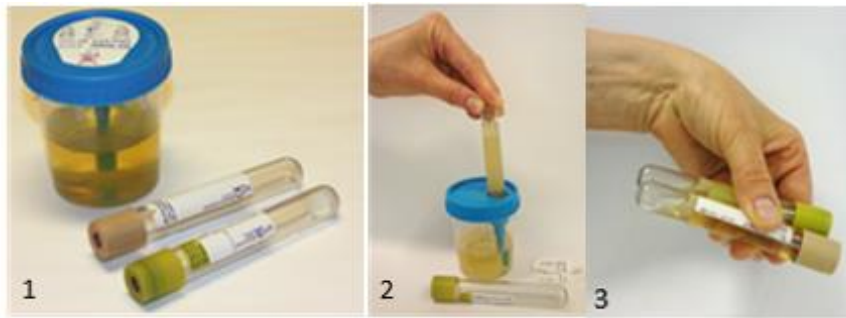

Kuva 1 Virtsanäyteputket ja näytepurkki

Kuva 2 Putkien täyttäminen

Kuva 3 Putkien sekoittaminen 8-10 kertaa

Tuo näyteputket mahdollisimman nopeasti **laboratorion näytteenottopisteeseen sen aukioloaikana** tai hoito-osastolta saamasi ohjeen mukaan. Näytteet eivät saa jäätä.

Tyhjennä virtsanäytepurkki ja heitä se kotona normaalien kotitalousjätteiden joukkoon.

Voit ottaa näytteenottoon liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon, poliklinikkaan tai laboratorioon. Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Esitietolomake

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenotto pvm ja kellonaika: _____

Kuinka kauan virtsa on ollut rakossa?

Yli 4 tuntia ☐ Alle 4 tuntia ☐

Näytteenottotapa:

Keskivirtsa ☐

Kertaiskatetri ☐

Kestokatetri ☐

Cystofix ☐

Keinorakko ☐

Päivitetty 7.3.2024 Preanalytiikkatyöryhmä