


EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

HÖRAPPARAT

Hörapparatens delar

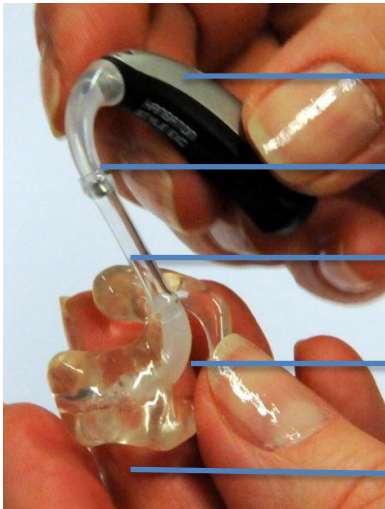

Hörapparat

Hörapparatens krok

Mellanliggande slang (bytbar)

Öroninsatsens krok

Öroninsats

Hörapparatens service


- Du får inte våta hörapparaten.
- Rengöring bara genom att torka, t.ex. med en duk.
- Hörapparatens batterilucka ska lämnas öppen över natten.
- Det är bra att ta bort batterierna om apparaten inte används på en längre tid.
- Förvara hörapparaten i förvaringslådan.
- Granska varje dag att hörapparaten är ren eftersom vaxet i hörselgången kan blockera öroninsatsen. Vaxet kan göra att du inte hör med apparaten ordentligt eller att den tjuter.



Rengöring av insatsen




Insatsen är fast i hörapparaten krok med en mellanliggande slang. För att tvätta insatsen lossa den från slangen.

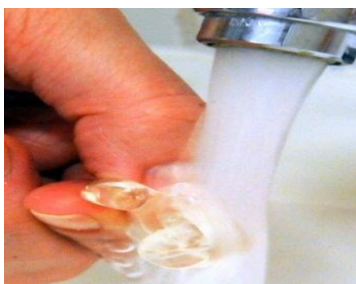

Insatsen tvättas med ljummet vatten och med mild tvål ungefär en gång i veckan. Vid behov kan den blötas en stund.



Torkningen av insatsen är viktigt. Man hör inte med hörapparaten ifall att det finns vatten kvar i ljudkanalen. Man blåser vattendropparna bort från ljudkanalen eller man lämnar den att torka över natten vid behov.

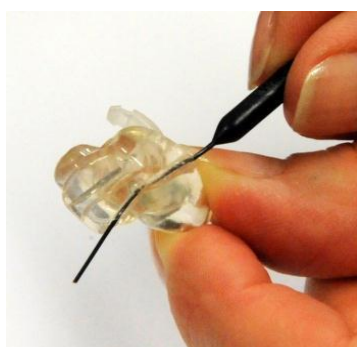

Insatsens luftventil öppnas med en tråd eller ett verktyg avsett för det. Vid behov kan även ljudkanalen rengöras på detta vis.

Byte av mellanliggande slang


Hörapparatsens mellanliggande slang ska bytas med 1-2 månaders mellanrum.

När den gamla slangen blir hård och gul är den svårare att lossa och hörapparatsens krok kan gå sönder. Den gamla slangen blir också lös i ändorna, delarna kan lossna från varandra och hörapparaten kan droppa från örat.

Hörapparaten tjuver lättare och du hör sämre med den om den mellanliggande slangen inte byts med jämna mellanrum.



Ta bort den mellanliggande slangen från insatsen och från hörapparatsens krok.

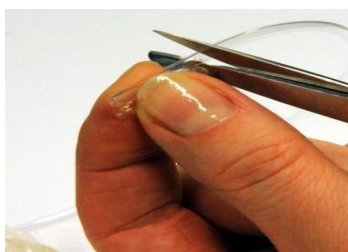

Mät den nya slangens längd enligt den gamla.



Koppla den nya slangen noggrant med insatsen och hörapparaten.



Slangen ska sitta ca 2-3 mm på kroken.